

Histolog[®]

Dip

Español

Nombre del producto	Volumen	Número de catálogo del producto (REF)
Histolog [®] Dip	250 ml	005

INDICACIONES

El Histolog[®] Dip es una tinción histológica fluorescente indicada para obtener imágenes de muestras de tejido con el Histolog[®] Scanner.

MECANISMO DE ACCIÓN

Histolog[®] Dip contiene un colorante fluorocromático que se une a ácidos nucleicos y a algunas proteínas cargadas negativamente. Este colorante revela la microestructura morfológica de muestras de tejido para obtener imágenes con el Histolog[®] Scanner.

COMPOSICIÓN

Histolog[®] Dip contiene <0,1 % de naranja de acridina en solución salina tamponada.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este producto está indicado para que lo utilicen profesionales sanitarios para el diagnóstico in vitro.

El Histolog[®] Dip es no estéril y está contraindicado para el examen de tejido in vivo.

Deséchelo después de usarlo, siguiendo la normativa local sobre manipulación y eliminación de materiales infecciosos.

Al manipular la solución Histolog[®] Dip, evite el contacto con la piel y con los ojos utilizando el equipo protector adecuado.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto a 15-30 °C. La fecha de caducidad se refiere al producto en su recipiente intacto cuando se almacena como se indica. No conservar una vez abierto.

DETERIORO DEL PRODUCTO

No utilice el producto si hay indicios de fugas o de daños en el frasco.

No utilice el producto si hay indicios de precipitado o si la solución muestra otros signos de deterioro.

RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS

Las muestras de tejido deberán recogerse y manipularse siguiendo las pautas locales.

Los colorantes de marcado de tejidos, si se utilizan, deberán aplicarse sobre la muestra de tejido solamente después de finalizar el procedimiento de obtención de imágenes con el Histolog[®] Scanner.

MATERIALES

Suministrados:

Histolog[®] Dip

Necesarios pero no suministrados:

Histolog[®] Scanner (REF 003), Histolog[®] Dish (REF 004), solución salina, 2 recipientes de inmersión

PROCEDIMIENTO

1. Tiña la muestra sumergiéndola 10 segundos en el recipiente de inmersión relleno con solución Histolog[®] Dip. Un frasco de Histolog Dip está destinado a un único procedimiento por paciente.
2. Aclare la muestra sumergiéndola de 2 a 5 segundos en el recipiente de inmersión relleno con solución salina.
3. Obtenga imágenes de la muestra con el Histolog[®] Scanner.

INTERPRETACIÓN

La distribución del colorante fluorocromático en la muestra de tejido revela su microestructura morfológica en imágenes adquiridas con el Histolog[®] Scanner.

CONTROL DE CALIDAD DEL USUARIO

Examine el color y la claridad de la solución Histolog[®] Dip. La solución deberá ser transparente y naranja, y no mostrar indicios de precipitado.

Para lograr un mayor control, mida el pH de la solución. El pH deberá estar entre 7,0 y 7,4.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

La tinción de la muestra y la calidad de las imágenes se ven afectadas negativamente por los colorantes de marcado de tejidos y por el exceso de sangre.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Este producto no contiene sustancias que, por su naturaleza o sus cantidades, puedan clasificarse como peligrosas para la salud humana ni para el medio ambiente conforme a las disposiciones del reglamento CE 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).

AVISO

Notifique cualquier incidente grave relacionado con el Histolog® Dip a SamanTree Medical SA y a la autoridad competente de su país.

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

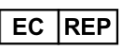
	Código de lote
	Número de catálogo
	Producto sanitario para diagnóstico in vitro
	Fecha de caducidad
	No estéril
	Fabricante
	Consultar las instrucciones de uso
	Límite de temperatura (almacenamiento)
	Marcado CE de conformidad con la directiva 98/79/EC y el reglamento (UE) 2017/746
	Este lado hacia arriba
	Mantener seco
	No reutilizar
	Representante autorizado en la CE
	Marcado UKCA de conformidad con los reglamentos sobre productos sanitarios de 2002 (RU)
	Importador

TABLA DE REVISIONES

Ver.	Descripción de los cambios
1.0	Versión inicial.
1.1	Aumento de la vida útil después de abrir el producto.
1.2	Aumento de la vida útil después de abrir el producto. Adición de nuevas advertencias.
1.3	Pequeños cambios en la redacción.
1.4	Adición de traducciones y cambio de formato.
1.5	Adición de números de referencia y versión adicionales.
1.6	Cambio de la dirección del fabricante.
1.7	Adición de «Aviso», «Composición», «Tabla de revisiones», representante autorizado en la UE y persona responsable en el RU.
1.8	Actualizar las secciones «Conservación» y «Procedimiento». Añadir la información de atención al cliente



SamanTree Medical SA

Avenue de Provence 12

1007 Lausana

Suiza

Atención al cliente

Tel.: +41 21 623 0073

contact@samantree.com

Copyright © 2025

Histolog es una marca registrada de SamanTree Medical.



SamanTree Medical France SASU

c/o A.A.C.I.

2 avenue des Allobroges

74200 Thonon-les-Bains

Francia



Persona responsable en el RU

UKMDR Ltd.

71-75 Shelton Street, Covent Garden

Londres WC2H 9JQ

Reino Unido